

CSAN 2026 · CURSO PRE-CONGRESO · DÍA 2

Diseño y ejecución de experimentos conductuales

Juan Kamienkowski · Octavio Castro · Ramón Igarreta · Gustavo Verón

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada · ICC, UBA–CONICET

Ejecutar, sincronizar y analizar

Hora	
9:30	Ejecución cruzada
10:05	Buenas prácticas y validación: timing
10:50	Café
11:05	Entornos de ejecución
11:25	Sincronización y hardware, con osciloscopio
12:10	Extender PsychoPy con código
12:30	Almuerzo

Hora	
13:30	Código: una marca en el momento justo
14:00	Revisión de resultados y archivos de datos
14:30	Leer y analizar los datos de la clase
15:40	Café
15:55	El efecto Stroop de la clase
16:20	Charla sobre sus proyectos y cierre
17:00	Fin del curso

Ejecución cruzada

1. Cada pareja deja su experimento abierto en el Builder, en su computadora
2. En el pizarrón: qué experimentos le tocan a cada persona, dos o tres de otras parejas
3. Vayan a esas computadoras y córranlo con **su** código, en serio
4. No hay que subir nada: el CSV queda en la [data/](#) de lxs autorxs

Después del almuerzo, cada pareja abre los datos que le generaron.

10:05 · JUAN

Buenas prácticas y validación

Timing: lo que se pide, lo que la computadora hace y lo que se ve

TIMING

**Si piden que la palabra dure 200 ms,
¿dura 200 ms?**

El archivo registra 0.2 s: es la duración pedida, no la medida.

Exactitud y precisión

Exactitud

¿Está centrado en el valor pedido?

$$\text{sesgo} = \bar{d} - d^*$$

Un retraso **constante** de 20 ms: se resta

Precisión

¿Cuánto varía de un trial a otro?

$$s = \sqrt{[\Sigma (d_i - \bar{d})^2 / (n - 1)]}$$

Un retraso que va de 5 a 40 ms: ruido en cada trial


Retraso constante c : $(A + c) - (B + c) = A - B \rightarrow$ el efecto no cambia

Retraso variable r : $\text{Var}(\text{RT medido}) = \text{Var}(\text{RT}) + \text{Var}(r) \rightarrow$ el ruido crece

d : duración medida en cada trial · d^* : la pedida · A y B : los tiempos de reacción de dos condiciones

TIMING

La cadena de retrasos

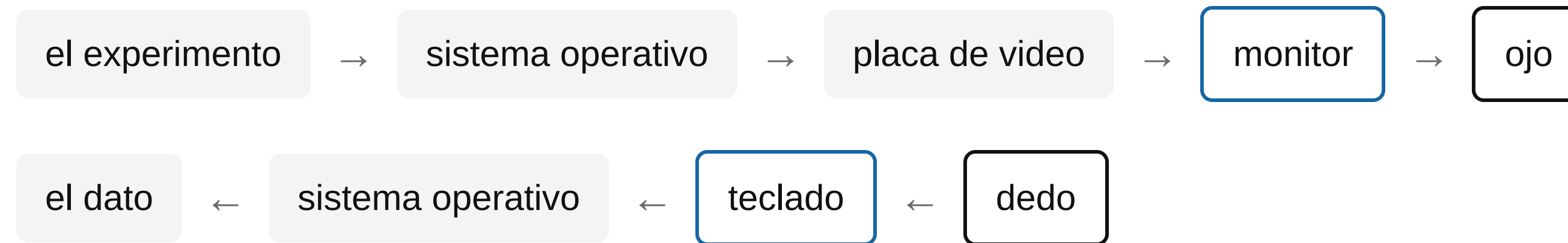

Cada flecha suma retraso. PsychoPy controla la primera; **el eslabón débil casi nunca es el software.**

El monitor pone el límite

16.7 ms

= $1 / 60$ Hz, lo que dura un frame

- Solo existen múltiplos de $1 / f$: 16.7, 33.3, 50 ms...; **20 ms no existe**
- La imagen se dibuja de arriba hacia abajo: abajo aparece hasta ~10 ms después
- Monitores que "mejoran" la imagen suman 20–30 ms, variables: modo *Game* y nada más

Pedir en frames

En el Builder

Stop → **duration (frames)** → 12

$$n = \text{duración} \times f = 0.2 \text{ s} \times 60 \text{ Hz} = 12$$

Y al empezar

Medir la frecuencia real. Nunca asumir 60 Hz: hay pantallas a 59.94, 120 o 144

```
# Lo que hace por dentro
for frame in range(12):
    palabra.draw()
    win.flip()
```

`win.flip()` espera al próximo refresco del monitor: por eso contar frames es exacto.

Teclado y audio

Dispositivo	Retraso
Teclado USB común	4 a 25 ms, según el modelo, y no siempre igual
Caja de botones	Menos de 1 ms, con reloj propio
Audio con PsychoPy (PTB)	Del orden del ms, si se agenda
Audio con librerías viejas	Hasta 100 ms

Para tiempos de reacción críticos, **caja de botones**; para un sonido crítico, **medirlo**.

Teclas apretadas antes de tiempo

```
respuesta.clearEvents() # tirar lo que ya se apretó  
win.flip() # aparece el estímulo  
respuesta.clock.reset() # el reloj arranca acá
```

- El Builder lo hace solo cuando el teclado arranca con el estímulo
- Un RT de 3 ms en el archivo es alguien que se adelantó
- En el análisis, el piso de 200 ms atrapa lo que se escape

Qué midió el *timing mega-study*

En laboratorio

< 1 ms

de precisión media en estímulo visual, audio y respuesta, para PsychoPy, Psychtoolbox, Presentation y E-Prime

Online, tiempos de respuesta

< 3.5 ms

de precisión con PsychoPy en todos los navegadores probados; más variable en todo lo demás

Bridges, Pitiot, MacAskill y Peirce (2020). The timing mega-study. *PeerJ*, 8, e9414. Medido con hardware externo.

TIMING

Frames perdidos

- Frame perdido: un intervalo entre flips mayor a $1.5 / f$ (a 60 Hz, más de 25 ms); el estímulo dura **16.7 ms más**
- Culpables: otros programas, el antivirus, la ventana chica, imágenes que se cargan justo cuando hay que mostrarlas
- Remedio barato: pantalla completa, nada más abierto, estímulos precargados

El problema serio: que se pierdan más en una condición que en otra, porque la diferencia de duración queda confundida con la condición.

Midan su máquina

1. Coder →
[dia2/medir_maquina/medir_maquina.py](#) → Run
2. Diez segundos gira una barra: no toquen nada
3. Anoten los números
4. `FULLSCREEN = False` y otra vez

¿A cuántos Hz está la pantalla?

¿Qué cambió en ventana?

¿Qué duraciones se pueden pedir y cuáles no existen?

¿Se perdieron frames? ¿Qué había abierto?

Buenas prácticas

- Pantalla completa, siempre
- Nada más abierto; wifi y avisos apagados
- Medir la frecuencia real al empezar
- Duraciones críticas en frames
- Precargar imágenes y sonidos
- Guardar más de lo que parece necesario
- Correrse a uno mismo, y mirar los datos
- Reportar versión, sistema, monitor y Hz
- Si el efecto es de pocos ms: medir con hardware

11:05 · JUAN

Entornos de ejecución

El lugar donde corre el experimento limita qué se puede medir

Laboratorio, online y con otro equipo

Dónde	Qué se controla	Precisión	Sirve para
Laboratorio	Monitor, teclado, luz, silencio	Menos de 1 ms en software	Efectos chicos
Online	Casi nada	De ms a decenas de ms	Efectos grandes, mucha gente
Con otro equipo	Lo que manda el equipo	La de la sincronización	EEG, eyetracking, fMRI

El criterio: **el tamaño del efecto buscado frente a la variabilidad temporal del entorno.**

fMRI: sincronizar con el escáner

Arrancar

El escáner manda un pulso que llega como una tecla; el experimento la espera

En el Builder: una rutina con un Keyboard que acepta, por ejemplo, '5'

No derivar

Si cada trial se pasa 3 ms: $300 \times 3 \text{ ms} = 0.9 \text{ s}$ de desfase al final

Non-slip timing: rutinas de duración fija, y PsychoPy corrige sobre la marcha

11:25 · OCTAVIO

Sincronización y hardware

Marcas TTL, medidas con un osciloscopio

El problema de los dos relojes

PsychoPy

muestra el estímulo a los 12.480 s de su reloj

EEG

viene grabando desde hace 8241.32 s en el suyo

¿En qué punto del EEG apareció el estímulo? **Hace falta una marca en los dos a la vez.**

Qué es una marca TTL

1

cable por bit

0 o 5 V

apagado o prendido

$2^8 = 256$

códigos con 8 cables, de 0 a 255

La ventaja: entre el código y el cable **no** hay sistema operativo, buffers ni drivers.

Por dónde sale la marca hoy

Vía	Retraso	Comentario
Puerto paralelo	Despreciable	Ya no viene en ninguna notebook
Caja USB de triggers	Pocos ms, especificado	La opción realista
Arduino	Pocos ms, hay que medirlo	La barata
Adaptador USB-serie	Del orden del ms	Para medir timing, no para el EEG

Con USB hay un buffer y un driver en el medio: **se mide una vez** en cada montaje.

Dónde va la marca

Mal

```
puerto.setData(codigo)  
win.flip()
```

Bien

```
win.flip()  
puerto.setData(codigo)
```


`flip()` espera al monitor, hasta 16.7 ms. Antes, la marca sale cuando el código la pide; después, **cuando el estímulo aparece.**

Bajar la línea, y un código por condición

Volver a cero	Si la línea no baja, dos marcas iguales seguidas se ven como una
Un código por condición	11 congruente, 21 incongruente: el EEG se segmenta sin abrir el CSV
Guardarlo también	Una columna <code>trigger_code</code> en el CSV: si se pierde una marca, se reconstruye

DEMO

El montaje

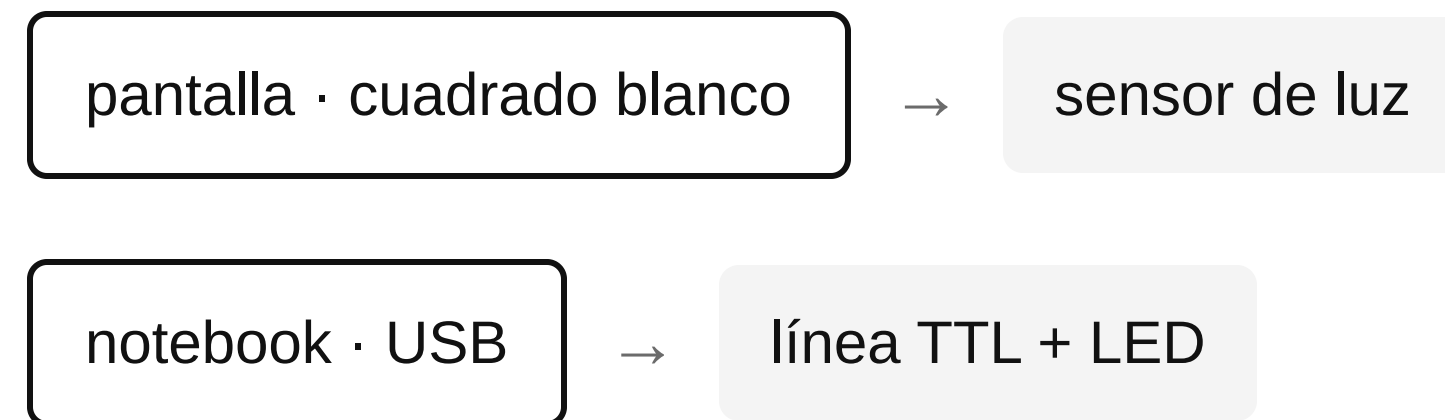

Osciloscopio

Canal 2: cuándo apareció el estímulo
de verdad

Canal 1: cuándo salió la marca

La distancia entre los dos flancos **es el error.**

Marca antes o después del flip

Corrida	Qué se ve en el osciloscopio
Antes del flip	La luz llega entre 0 y 17 ms después de la marca, en un lugar distinto cada vez: una nube
Después del flip	La luz llega siempre a la misma distancia, unos pocos ms: una línea

Un retraso constante se resta; uno variable no se puede corregir después.

¿Cuándo suena un bip?

Cómo se pide	Qué se ve
play() y la marca	El sonido arranca varios ms después de la marca, y no siempre igual
Agendado	Se le pide a la placa que empiece en un instante, y la marca sale en ese instante: alineados
Con la pantalla	Como el Builder: el sonido sale con el próximo flip

El retraso del audio **no aparece en ningún archivo**: se agenda, y se mide una vez.

Lo que medimos antes del curso

[captura: antes del flip]

[captura: después del flip]

[captura: audio]

Otros dispositivos y protocolos

Qué	Para qué
Lab Streaming Layer	Varios aparatos por red, cada uno con sus marcas de tiempo. Un aparato: cable; varios: LSL
Eyetracking (ioHub)	Tobii, EyeLink, GazePoint, Pupil Labs; los datos van a un archivo aparte, no al CSV
Cajas de botones	Tiempos de reacción con reloj propio
Arduino por puerto serie	Estimulación táctil, olfativa, eléctrica; leer sensores

Seguridad eléctrica

- Un Arduino saca **5 V**; varios amplificadores esperan **3.3 V**
- Entre la computadora y un equipo conectado a alguien: **optoacoplador**
- **Masa común**: sin las tierras unidas no se mide nada coherente
- Nada se conecta a un participante sin leer el manual y consultar a quien sepa

Seis reglas

1. El reloj de la computadora no puede medirse a sí mismo
2. La marca va **después** del flip
3. La línea vuelve a cero
4. Un código por condición
5. El montaje se valida una vez, con un instrumento de afuera
6. Si el experimento lo decide, el experimento lo guarda

12:10 Y 13:30 · JUAN

Extender PsychoPy con código

El Builder escribe Python: se puede leer, y se puede completar

El Builder es un generador de scripts



- Leer el `.py` explica todo lo que el Builder hace por detrás
- Editarlo **no**: se sobrescribe la próxima vez que se corre desde el Builder

CÓDIGO

Cada nombre del Builder es una variable

Nombre	Qué es
<code>palabra.status</code>	Si el estímulo todavía no empezó, está, o ya terminó
<code>respuesta.keys</code>	La tecla que se apretó en este trial
<code>word, congruent</code>	Las columnas del archivo de condiciones, en este trial
<code>trials</code>	El bucle: <code>trials.thisN</code> , <code>trials.finished</code>
<code>thisExp</code>	El archivo de datos
<code>win</code>	La ventana

Cuándo corre cada pestaña

Pestaña	Cuándo corre	Para qué
Begin Experiment	Una vez, al arrancar	Crear contadores, definir funciones
Begin Routine	Al empezar cada trial	Preparar el trial
Each Frame	60 veces por segundo	Reaccionar mientras pasa
End Routine	Al terminar cada trial	Guardar, contar
End Experiment	Una vez, al final	Cerrar puertos, resumir

Each Frame corre **antes** de cada flip: lo que se dibuja ahí todavía no está en pantalla.

Tres cosas que el Builder solo no hace

Cortar una rutina

```
# Each Frame  
if respuesta.keys: continueRoutine = False
```

Saltear una rutina

```
# Begin Routine  
if tipo_de_bloque != 'practica': continueRoutine = False
```

Contar

```
# Begin Experiment  n_correctas = 0  
# End Routine      n_correctas += respuesta.corr
```

Si el experimento lo decide, el experimento lo guarda

Al CSV, una columna nueva

```
thisExp.addData(  
    'posicion', posicion  
)
```

Al .log, una línea con la hora

```
logging.data(  
    f'TRIGGER {codigo}'  
)
```

Todo lo que se sortea por código, se guarda. Si no, después no hay forma de saber qué vio cada quien.

La marca, después del flip

```
# Begin Experiment
def mandar_marca(codigo):
    logging.data(f'TRIGGER {codigo}')

# Begin Routine
marca_pendiente = True

# Each Frame
if palabra.status == STARTED and marca_pendiente:
    win.callOnFlip(mandar_marca, int(trigger_code))
    marca_pendiente = False
```

`callOnFlip` no la manda ahora: la agenda para **justo después del próximo flip**.

Una marca en el momento justo

- | | | |
|----------|--|--------|
| A | Una columna <code>trigger_code</code> en el archivo de condiciones | 10 min |
| B | El componente Code, debajo del estímulo | 25 min |
| C | Abrir el <code>.log</code> : una línea TRIGGER por trial, pegada al estímulo | 15 min |

Para pensar: el `.log` dice que la marca y el estímulo coinciden. **¿Quién escribió las dos líneas?**

14:00 · OCTAVIO

Los archivos de datos

Los CSV que otras personas dejaron en su experimento

Tres archivos por sesión

Extensión	Qué es	Cuándo se abre
.csv	Una tabla, una fila por trial	Siempre: es el que se analiza
.log	Todo lo que pasó, con la hora	Timing, marcas, frames perdidos
.psydat	El experimento entero, en Python	Cuando al CSV le falta algo

Los crudos no se editan **nunca**. El análisis los lee y escribe copias.

DATOS

De dónde sale el nombre

sub-07 _ stroop _ 2026-09-30_10h15.23.456 .csv

participant experimento fecha y hora

- Códigos, nunca nombres y apellidos
- Ceros a la izquierda: sub-01 ... sub-27 ordena bien
- Si todxs ponen test, no se pisan, pero no se sabe quién es quién

Cada columna es de uno de cuatro grupos

Grupo	Ejemplos
Del archivo de condiciones	word, congruent, correct_key
Registradas en el trial	respuesta.keys, respuesta.rt, palabra.started
Estado del bucle	trials.thisN, trials.thisIndex
De la sesión	participant, date, psychopyVersion, frameRate

.rt está en **segundos**: 0.581 son 581 ms **todo** cuenta **desde 0**

36 trials, 38 filas

fila 0	instrucciones
1 a 36	los trials
fila 37	despedida

Cada rutina **fuera de un bucle** escribe su fila. Con bloques, cada bloque también.

```
trials = trials[trials['respuesta.rt'].notna()]
```

Control de calidad, antes de analizar

- Cada participante tiene los trials esperados
- Un archivo por persona, y participant distinto en cada uno
- La misma psychopyVersion; frameRate cerca de 60, 120 o 144
- trials.thisIndex: cada condición la misma cantidad de veces
- Aciertos ni en el azar ni en 100 % para todos
- Ningún RT negativo ni más largo de lo que la tarea permite

Si algo falla, el problema es del **experimento**, no del análisis.

14:30 · PRÁCTICA DE A DOS

Los datos de la clase

Consigna 6 · el Stroop mínimo que corrieron ayer a las 9:30

Cinco partes, en orden

Parte	Qué	Tiempo
1	Mirar la tabla antes de calcular nada	10 min
2	Describir: RT medio, mediano y aciertos por persona	15 min
3	Graficar las dos distribuciones	15 min
4	¿Hay efecto Stroop? En ms, y con un test	20 min
5	Guardar la tabla de efectos	5 min

Control de la parte 1: filas = participantes × 36. **Si no da, no sigas.**

Todos los archivos en una tabla

```
import pandas as pd
from pathlib import Path

archivos = sorted(Path('datos_clase').glob('*.csv'))
trials = pd.concat([pd.read_csv(a) for a in archivos])

trials.shape      # filas = personas × 36
trials.columns    # ¿de qué grupo es cada una?
trials.head()
```

Una fila por trial, todas las personas apiladas: `participant` dice de quién es cada una.

Tres filtros de limpieza


```
es_trial    = trials['response_time'].notna()  
es_correcto = trials['correct'] == 1  
en_ventana  = trials['response_time'].between(0.2, 2.0)  
  
limpios = trials[es_trial & es_correcto & en_ventana]
```

Menos de **0.2 s**: una anticipación,
no una lectura

Más de **2.0 s**: se distrajo

¿Y por qué esos números?

Primero dentro de cada persona

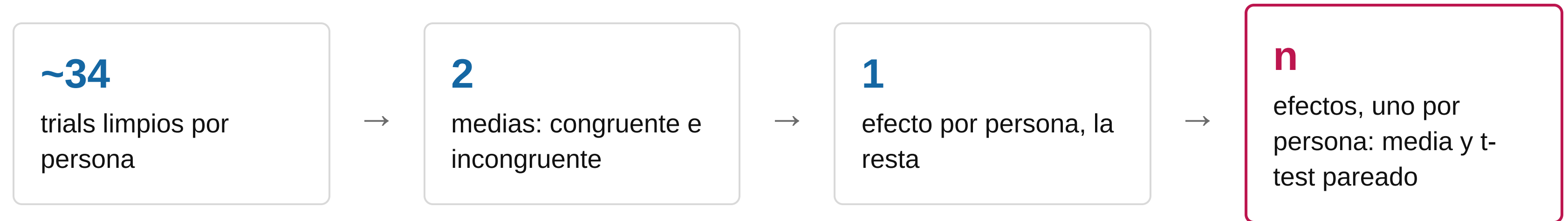

$$d_j = \bar{x}_j(\text{incongruente}) - \bar{x}_j(\text{congruente})$$

$$t = \bar{d} / (s / \sqrt{n}), n - 1 \text{ grados de libertad}$$

j: cada participante · s: desvío estándar de las d_j

```
limpios.groupby(['participant', 'congruent'])['response_time'].mean()
```

El efecto Stroop de la clase

— ms

efecto medio, incongruente
menos congruente

— / —

participantes con efecto positivo

$t(\text{—}) = \text{—}$

$p = \text{—}$

En la literatura, entre 70 y 100 ms.

¿Cuánto depende de los umbrales?

Ventana de RT	Trials descartados	Efecto
Sin ventana, solo errores	—	— ms
0.2 a 2.0 s , la nuestra	—	— ms
0.15 a 2.5 s	—	— ms
0.3 a 1.5 s	—	— ms

El criterio se decide **antes** de ver el resultado, y se escribe.

Qué va en Métodos

Qué	Ejemplo
Software	PsychoPy 2026.2.3 (Peirce et al., 2019)
Pantalla	Tamaño, resolución, 60 Hz, a 60 cm
Estímulos	Tamaño en grados, colores, duraciones en ms
Diseño	9 combinaciones de palabra y color, 4 veces cada una, al azar
Exclusión	Errores y RT fuera de 0.2–2.0 s, decidido antes
Timing	Si se validó, y con qué instrumento

Charla sobre sus proyectos

Las preguntas de ayer

1. La pregunta, en una frase
2. Un trial, con sus tiempos
3. Lo que varía y lo que se mide
4. Diseño y dónde corre
5. Hardware
6. **El obstáculo**

Cómo lo hacemos

Con quien quiera, de a un proyecto

Primero EEG, fMRI y eyetracking, y quienes vienen de lejos

Las dudas que se repiten, al pizarrón

CIERRE

Para seguir

Materiales	github.com/joctavio287/DyECCSAN2026
-------------------	---

Preguntas	discourse.psychopy.org
------------------	---

Para leer	recursos/recursero.md: papers, paradigmas, videos
------------------	---

Cómo citar	Peirce et al. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. <i>Behavior Research Methods</i> , 51, 195–203.
-------------------	---

¡Gracias!